

RETTUNGSDIENSTE - MILITÄR - POLIZEI - JOURNALISTEN - NGO - CONTRACTER

wenn Sekunden zählen...



**CTC**  
Medical  
Tactical Medical Systems & Solutions



# SOF<sup>®</sup> TOURNIQUET


BUILT FOR SURVIVAL. ENGINEERED FOR EFFICIENCY.

Das neue SOF Tourniquet

Wenn Ausrüstung  
kein Kompromiss sein soll.



**TACTICAL MEDICAL**  
SOLUTIONS<sup>®</sup>

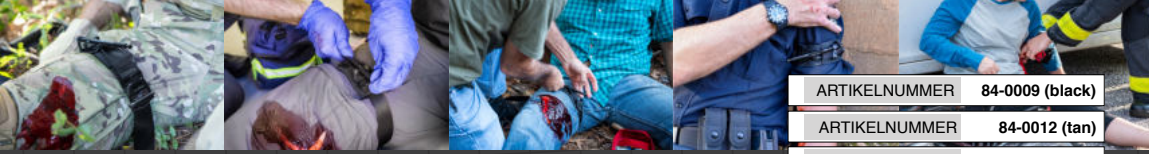

ARTIKELNUMMER	84-0009 (black)
ARTIKELNUMMER	84-0012 (tan)
L x B x H in mm	114 x 5 x 44
GEWICHT	105 g

**NEU**

### Neues Kompressionsband

Das neue Kompressionsband gleitet leichter durch den Verschlussclip und minimiert den Druckverlust bei längerer Anlage.



**NEU**

### Neuer Verschluss

Stabiler Schnellverschluss, überarbeitet und jetzt leichter und schneller zu handhaben.



**NEU**

### Slack Indikator

Gestickter Indikator der anzeigt, dass das SOF mit voller Kraft angelegt wurde. Verhindert zu leichtes Anlegen, verhindert Fehler.



### Hoch Stabiler Aluminiumknebel

Griffig und rutschsicher, leicht zu handhaben. Ein stabiler Knebel, aus einem Stück Aluminium gefertigt.



### Überarbeiter TRAC

Der TRAC (Tourniquet Retention Assistance Clip) wurde überarbeitet und stabiler gestaltet. Er ermöglicht ein temporäres Sichern des Knebels bei einer Einhändigen Anwendung.




### Tri-Ring Sicherung

Zur finalen Sicherung des Knebels, nach der Anlage des SOF. Sie kann sicher mit einer Hand bedient werden, und sichert den Knebel beim Patiententransport.



### Zeit Indikator

Zur Dokumentation der Anlagezeit des SOF, sichtbar ohne Teil des Sicherungsmechanismus des Tourniquets zu sein.

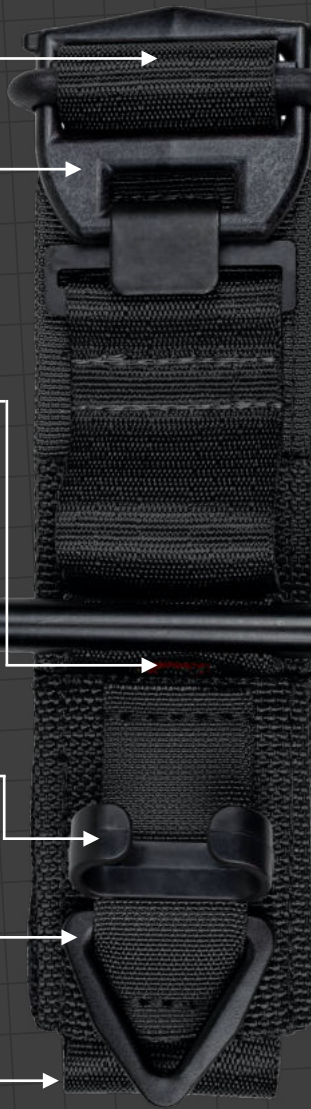

Tactical Medical Solutions, LLC  
1250 Harris Bridge Road  
Anderson, SC 29621  
USA

CTC Medical GmbH  
Schönfelder Weg 23-31  
16321 Bernau  
DE